


## NORIKS FIT — tricou compresiv

Compresie mulată care netezește silueta și susține o postură dreaptă.

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| Material | Tricotaj compresiv cu fibre micro-țesute  |
| Mărimi   | S – 5XL în funcție de greutatea corporală |
| Purtare  | 4 – 10 ore pe zi, sub haine               |
| Spălare  | La rece, program delicat, fără balsam     |
| Uscare   | La aer — uscătorul distruge compresia     |

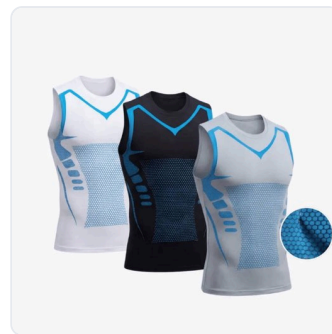

### ÎN PACHET

- 1 tricou compresiv (conform pachetului ales)

### START RAPID

1. Alege mărimea în funcție de greutatea corporală; pentru o compresie mai puternică ia mărimea mai mică.
2. Îmbracă tricoul de jos în sus, netezind materialul cu palma.
3. Spală la rece și usucă la aer — niciodată la uscător.

## 1. Alegerea mărimii

| Mărime | Greutate corporală |
|--------|--------------------|
| S      | 50 – 70 kg         |
| M      | 70 – 90 kg         |
| L      | 90 – 110 kg        |
| XL     | 110 – 130 kg       |
| 2XL    | 130 – 150 kg       |
| 3XL    | 150 – 170 kg       |
| 4XL    | 170 – 190 kg       |
| 5XL    | 190 – 210 kg       |

Alege mărimea după greutate, nu după mărimea unui tricou obișnuit. Între două mărimi: cea mai mică dă o compresie mai puternică, cea mai mare mai mult confort la purtarea pe toată ziua.

## 2. Îmbrăcare

- 1 Rulează tricoul până la guler, ca pe un ciorap.
- 2 Treci capul și brațele, apoi desfășoară-l în jos.
- 3 Cu palma netezește materialul de la talie spre piept, ca să nu rămână nicio cută.
- 4 Trage marginea de jos peste umeri — astfel tricoul nu se rulează în sus.

## Kako NORIKS djeluje?

Aktivna kompresija  
koja uklanja muške  
grudi

Ionska zona koja  
poboljšava formu, jača  
mišiće i podiže  
energiju

Pojačano djelovanje  
na salo oko struka za  
razgradnju masnih  
stanica



Compresia netezește silueta uniform.



Diferența de postură cu tricoul și fără el.

### 3. Cât timp să îi porți

- Primele zile: 3 – 4 ore pe zi, până te obișnuiești cu presiunea.
- Apoi: 8 – 10 ore, pe parcursul zilei de lucru.
- Nu dormi în el — pielea are nevoie de o perioadă fără compresie.
- Pentru un efect vizibil asupra posturii poartă-l zilnic; primele schimbări sunt descrise de utilizatori de obicei după aproximativ două săptămâni.

### 4. Rezolvarea problemelor

| Ce se întâmplă                 | Cauza                                         | Soluția                                                                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tricoul se rulează în sus      | Mărime prea scurtă sau prea mică              | Trage marginea peste umeri; dacă se repetă, ia mărimea mai mare          |
| Respirație îngreunată la șezut | Mărime aleasă prea mică                       | Treci la mărimea mai mare — compresia nu are voie să limiteze respirația |
| Compresia a slăbit             | Uscător sau balsam                            | Spală la rece, fără balsam, usucă la aer                                 |
| Roșeață sub braț               | Cută în material sau primă purtare prea lungă | Netezește materialul și scurtează purtarea la 3 – 4 ore                  |

### 5. Spălare și îngrijire

- Spălare la mașină la rece, program delicat, pe dos.
- Fără înălbitor și fără balsam.
- Nu usca la uscător — usucă la aer, întins, ca să se păstreze compresia și forma.
- Nu călca.

### 6. Garanție, schimb și retur

- Poți cere returul sau schimbul în termen de 14 zile de la livrare.

- Produsul trebuie să fie nefolosit, nespălat și în ambalajul original, cu bonul atașat.
- Costul returului este suportat de client — cu excepția cazului în care produsul a ajuns deteriorat sau a fost trimis un articol greșit.
- Banii îi returnăm pe PayPal sau IBAN, în 3 până la 5 zile lucrătoare de la primirea coletului.
- Pentru retur sau schimb scrie la [info@noriks.com](mailto:info@noriks.com) și menționează numărul comenzii.

Dacă produsul ajunge deteriorat sau cu un defect de fabricație, anunță-ne imediat — rezolvăm astfel de cazuri fără costuri pentru tine.

NORIKS FIT este un articol vestimentar pentru sprijin zilnic, nu un tratament medical. Nu pune un diagnostic și nu înlocuiește sfatul medicului. Dacă simptomele persistă, se accentuează sau apar după o accidentare, adresează-te medicului.