

NORIKS Bunion Fix — corector pentru monturi

Realinierea treptată a degetului mare cu 30 de minute până la 3 ore pe zi.

Mărime	Universal — se potrivește tuturor mărimilor de picior
Parte	Același corector pentru piciorul stâng și cel drept
Căptușeală	Căptușeală interioară moale care protejează pielea
Reglare	Benzi elastice cu tensiune reglabilă
Recomandat	De la 30 de minute până la 3 ore pe zi



ÎN PACHET

- 1 corector pentru monturi
- Benzi elastice pentru reglare


START RAPID

1. Pune corectorul astfel încât pernuța să stea lângă osul proeminent, iar bucla să cuprindă degetul mare.
2. Strânge banda doar cât să simți o întindere ușoară — niciodată până la durere.
3. În prima săptămână poartă-l 30 de minute pe zi, apoi prelungește treptat.

1. Punerea ortezei

- 1 Așază-te și sprijină piciorul astfel încât degetele să fie relaxate.
- 2 Trece degetul mare prin buclă până când pernuța se așază pe osul proeminent din lateralul piciorului.
- 3 Petrece banda în jurul mijlocului piciorului și strânge-o doar cât să simți o întindere ușoară.
- 4 Verifică dacă pernuța stă întinsă, fără cute, și dacă banda nu apasă pe partea de sus a piciorului.
- 5 Degetul mare trebuie tras spre exterior, dar fără o tensiune care provoacă durere.

Udobno, prilagodljivo i lako za nošenje kod kuće

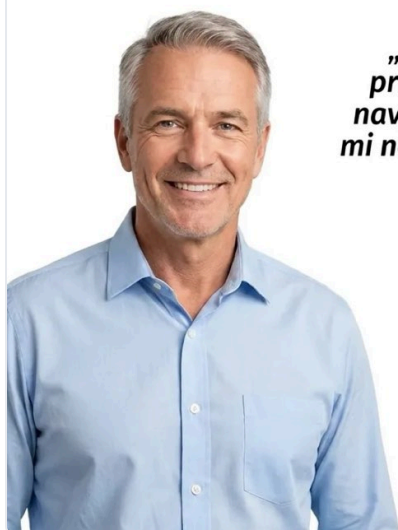

„Mekan je i lako se prilagodi. Stavim ga navečer uz TV i uopće mi ne smeta — zato ga nosim redovno.“

Marko Horvat
Korisnik Noriks Bunion Fixa



Corektorul cuprinde degetul mare și descarcă osul proeminent.

Zašto je Noriks drugačiji:



Napredna terapija poravnanja



Patentirani zglobni mehanizam



Podeseivo rastezanje



Meko jastučić za čukalj



Vrhunski izdržljivi materijali



Bezbolno poravnanje



Scopul este readucerea treptată a degetului mare într-o poziție mai corectă.

2. Plan de purtare

Perioada	Zilnic	Când
Săptămâna 1	30 de minute	Seara, în timp ce stai jos
Săptămâna 2	45 – 60 de minute	Seara sau în timpul repausului
Săptămâna 3	1 – 2 ore	Împărțit în două intervale
Din săptămâna 4	2 – 3 ore	Într-unul sau două intervale, după confort

Regularitatea contează mai mult decât durata. Treizeci de minute în fiecare zi dau un rezultat mai bun decât trei ore o dată pe săptămână.

3. La ce te poți aștepta

- Primele zile: senzație de întindere și ușurare după scoaterea corectorului.
- După aproximativ două săptămâni de folosire constantă: disconfort mai mic la mers și la stat în picioare.
- După aproximativ o lună: o schimbare mai vizibilă a poziției degetului mare.
- Corectorul acționează cât timp îl porți și cu folosire regulată — nu este o soluție de o singură dată.

4. Rezolvarea problemelor

Ce se întâmplă	Cauza	Soluția
Durere în timpul purtării	Banda strânsă prea tare	Slăbește banda; senzația trebuie să fie de întindere, niciodată de durere
Corectorul alunecă de pe deget	Banda strânsă prea slab sau piele umedă	Uscă piciorul și strânge banda cu o treaptă

Ce se întâmplă	Cauza	Soluția
Roșeață pe piele	Cută pe căptușeală sau purtare prea lungă la început	Întinde căptușeala și scurtează timpul de purtare la 30 de minute

5. Curățare

- Șterge cu o cârpă umedă și săpun delicat, clătește și lasă să se usuce la aer.
- Nu spăla la mașină și nu usca pe calorifer — elasticul își pierde tensiunea.

Nu purta corectorul peste o rană deschisă sau pe piele inflamată. În caz de diabet, sensibilitate redusă la nivelul piciorului sau durere puternică și persistentă, consultă mai întâi medicul.

6. Garanție, schimb și retur

- Poți cere returul sau schimbul în termen de 30 de zile de la livrare.
- Produsul trebuie să fie nefolosit, nespălat și în ambalajul original, cu bonul atașat.
- Costul returului este suportat de client — cu excepția cazului în care produsul a ajuns deteriorat sau a fost trimis un articol greșit.
- Banii îi returnăm pe PayPal sau IBAN, în 3 până la 5 zile lucrătoare de la primirea coletului.
- Pentru retur sau schimb scrie la info@noriks.com și menționează numărul comenzii.

Dacă produsul ajunge deteriorat sau cu un defect de fabricație, anunță-ne imediat — rezolvăm astfel de cazuri fără costuri pentru tine.

Bunion Fix este un sprijin de zi cu zi, nu un tratament medical. Nu pune un diagnostic și nu înlocuiește sfatul medicului. Dacă simptomele persistă, se accentuează sau apar după o accidentare, adresează-te medicului.