

NORIKS ErgoSit — pernă ortopedică de ședere

Decupaj pentru coccis și spumă cu memorie de densitate mare pentru șederea îndelungată.

Spumă	Spumă cu memorie OrthoFlex de densitate mare
Certificat	OEKO-TEX®, netoxică
Formă	Decupaj pentru coccis, sprijin conturat pentru umeri și coloană
Husă	Detașabilă, lavabilă la mașină
Utilizare	Scaun de birou, mașină, călătorii



ÎN PACHET

- 1 pernă ErgoSit
- Husă detașabilă lavabilă

START RAPID

1. Scoate perna din ambalaj și las-o 24 de ore ca spuma să își recapete forma completă.
2. Așaz-o pe scaun astfel încât decupajul să fie în spate, sub coccis.
3. Așază-te complet în spate, cu tălpile pe podea.

1. Înainte de prima utilizare

- Perna este comprimată pentru transport — după despachetare las-o 24 de ore la temperatura camerei. În acest timp frământ-o de mai multe ori cu mâinile și scutur-o, ca spuma să se distribuie.
- Mirosul de spumă nouă dispare după câteva ore de aerisire.


2. Așezare corectă

- 1 Pune perna pe scaun astfel încât **decupajul să fie în spate** — sub coccis, nu în față.
- 2 Partea plată a pernei trebuie să stea complet pe scaun, fără să depășească marginea.
- 3 Așază-te complet în spate, astfel încât spatele să atingă spătarul.
- 4 Reglează înălțimea scaunului astfel încât genunchii să fie la nivelul umerilor sau puțin mai jos, iar tălpile pe podea.



Vozite diljem zemlje bez bolova
Testirali i odobrili vozači kamiona

Decupajul elimină presiunea directă asupra coccisului.

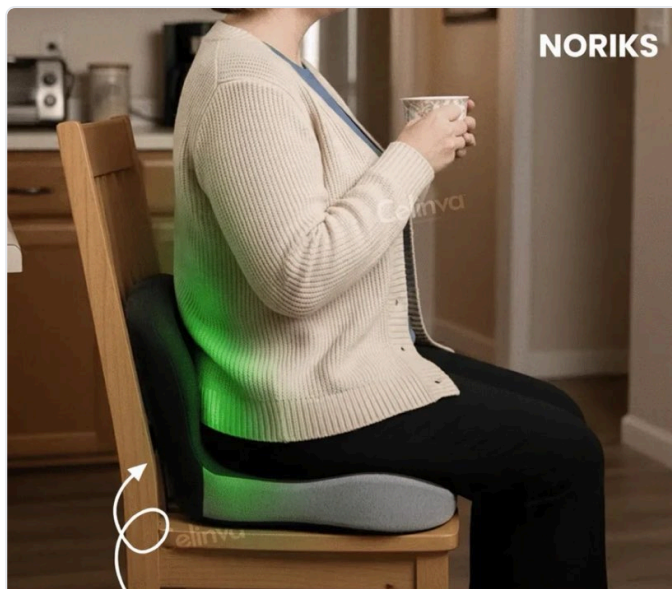

Automatski **ispravlja**
vaše **držanje**

Forma conturată distribuie greutatea uniform pe șolduri.

3. Utilizare zilnică

- Perna este destinată șederii zilnice — la birou, în mașină și în călătorii.
- Chiar și cu pernă ridică-te și mergi câteva minute la fiecare oră.
- Nu o folosi pe suprafețe foarte moi sau neregulate — sprijinul se pierde.

4. Rezolvarea problemelor

Ce se întâmplă	Cauza	Soluția
Perna alunecă pe scaun	Tapițerie netedă a scaunului	Întoarce husa cu partea antiderapantă în jos; pe scaunele din piele pune dedesubt un suport subțire
Presiunea pe coccis persistă	Decupajul întors spre față	Întoarce perna — decupajul stă în spate
Spuma pare tare	Încăpere rece	Spuma cu memorie se înmoaie la temperatura corpului în câteva minute
Perna este prea înaltă pentru birou	Înălțimea scaunului nereglată	Coboară scaunul cu înălțimea pernei

5. Spălare și îngrijire

- Scoate husa și spal-o la mașină la 30 °C, pe program delicat.
- **Nu spăla niciodată spuma la mașină și nu o scufunda în apă.** Șterge petele cu o cârpă umedă și las-o să se usuce la aer.
- Nu usca spuma pe calorifer sau în soare direct.
- Nu depozita perna strivită sub greutate — spuma își păstrează forma doar nesolicitată.

6. Garanție, schimb și retur

- Poți cere returul sau schimbul în termen de 30 de zile de la livrare.

- Produsul trebuie să fie nefolosit, nespălat și în ambalajul original, cu bonul atașat.
- Costul returului este suportat de client — cu excepția cazului în care produsul a ajuns deteriorat sau a fost trimis un articol greșit.
- Banii îi returnăm pe PayPal sau IBAN, în 3 până la 5 zile lucrătoare de la primirea coletului.
- Pentru retur sau schimb scrie la info@noriks.com și menționează numărul comenzii.

Dacă produsul ajunge deteriorat sau cu un defect de fabricație, anunță-ne imediat — rezolvăm astfel de cazuri fără costuri pentru tine.

ErgoSit este o pernă pentru sprijin zilnic la șezut, nu un tratament medical. Nu pune un diagnostic și nu înlocuiește sfatul medicului. Dacă simptomele persistă, se accentuează sau apar după o accidentare, adresează-te medicului.